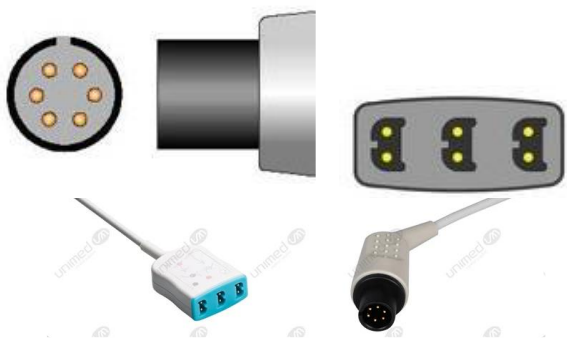


IMAGEN: 	PRODUCTO		CABLE ECG PARA 3 DERIVADAS
	MARCA		UNIMED
	REFERENCIA		LL-2340
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1
	RIESGO		IIA
USO - DESCRIPCIÓN			
Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.			
CARACTERÍSTICAS			
Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Conector	Redondo 6 pin/ 3 pin, estilo LL	
	Compatible con:	Abbott	EX-50; Lifecare 5100; Lifecare 5200
		ALT	800; 800 Plus; Apogee; CX ATL Ultrasound; CX200; CX400; HDI 9/2000;Interspec Cardiology XL; Mark IV; Mark VII; Ultramark 4; Ultramark 4 Plus;Ultramark 5; Ultramark 7; Ultramark 9
		American Optical	26125; 33167; 5260; 5330; Pulsar 4
		BCI	3101; 3404; 6100; 6200; 9100; 9200; Advisor; Autocorr
		Carewell	CPM-8000
		CAS Med	CAS740 VITAL SIGNS
		Conmed	90347
		Contec	CMS9000; CMS6800
		Corometrics	Corometrics 556
		Criticare	1100; 2200; 504US; 504USP; 506; 507; 507E; 507ELC2; 507S; 508; 602-4B;602-4USP; 8100; 8100E; 8100EP; Poet 2; Scholar; nCompass; nGenuity 8100E
		Critikon/Dinamap	8100T; Dinamap 8700; Dinamap 9700; MPS Select; Pro1000
		Datex Ohmeda	E-PRESTN; M-PRESTN; enGuard CM5
		Digicare	LW600
		Draeger > Air Shields	Porta-Fib I; Porta-Fib II; Porta-Fib III; HRRM-71-1; HRRM-71-2; System 5(New); System 6 (Neonatal)
		Draeger	Vitalert 2000; Vitalert 3000
		DRE	Waveline EZ MAX
		Edan	M50; M8; M80; M8A; M8B; M9; M9A
		GE > Marquette	Dash 1000; Dash 2500; Dash 2000; Dash 3000; Dash 4000; Dash 5000; Solar3000; Solar 9500; Solar 8000; Tram100; Tram200; Tram300; Tram400;Tram500; Tram600; Tram800; Aestiva 5
Goldway		UT4000A; UT4000Apro; UT4000B; UT4000C; UT4000F; UT4000Fpro;UT6000A; UT6000F; UT4800	
Guthan	1000		
Infinium	Infitron II; Omni; Omni II		

		Invivo	360SL; 450SL; 521A; Escort 100; Escort 101; Escort 102; Escort 200; Escort300; PortaPak 1000; PortaPak 80; PortaPak 90; Prism 101; Prism 102; Prism200; Prism 300; Millennia 3500
		Ivy Biomedical	101(before 1989); 402; 700; 7800; Cardiac Trigger Monitor 3150
		Mediana	YM6000
		Medtronic > Physio Control	1440/R; Lifepak 5; Lifepak 6; Lifepak 6S; Lifepak 7; Lifepak 8; Lifepak 9; Lifepak 10; VSM-2; VSM-3; VSM-1ESF; VSM-2ESF
		Mennen	Enmove 1000; Envoy; Vitalogik4500
		Midmark > Cardell	9403V; 9405; MAX-12 Duo HD; Max-1
		Mindray	DPM4; DPM5; MEC200; MEC1000; MEC1200; MEC2000; PM7000; PM8000; PM9000; PM9000EX
		Nihon Kohden	BSM-8301A; BSM-8302A; BSM-8500A; BSM-8502A; OEC-6102A; OEC-7102A; OEC-8108A; OEC-6105A; TEC-7100A; OEC-5200A; OEC-7200A; OEC-7300A
		Omron > Colin	BP308; BP408; CBM3000; M20; M30; MS20
		Philips	iE33 xMatrix Ultrasound CX50; M3921A A1; M3923A A1; M3925A A1; M3927A A3; M3929A A3
		Spacelabs	Ultraview 90300; Ultraview 90400; Ultraview 90600; Ultraview 90700; Series500; 600Series; 900Series; 400; 500; 600; 900; 90300; 90303B; 90308; 90408; 90425; 90428; 90431; 90432; 90470; 90600; 90700; 90701; 90721; 90724; PC Bedside; PCMS; TEK-208; TEK-408; TEK-413; TEK-414; TEK-511; TEK-512; TEK-514; TEK-5214045
		Tektronix	4045 Defib; 208 Series; 400 Series; 500 Series
		Welch Allyn	1500; Atlas; Atlas 6200 Series; PIC 30; PIC 40; PIC 50; Propaq 100 Series; Propaq 200 Series; Propaq 206 EMPSC; Propaq CS; Propaq Encore; UltraSmart
		ZOLL	D900; E Series; M Series; PD1200; PD1400; PD1600; PD1700; PD2000; RSeries
		Longitud del cable:	2.5M
		Diámetro del cable	5.0mm
		Peso:	159g
		Autoclavable:	No
		Temp. Operación:	5°C a 45°C
		Humedad operación:	0 a 80% No condensada
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada		
PRESENTACIÓN	Unidad.		

RECOMENDACIONES	<u>Mantenimiento:</u> - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. <u>Precauciones:</u> - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.
------------------------	--