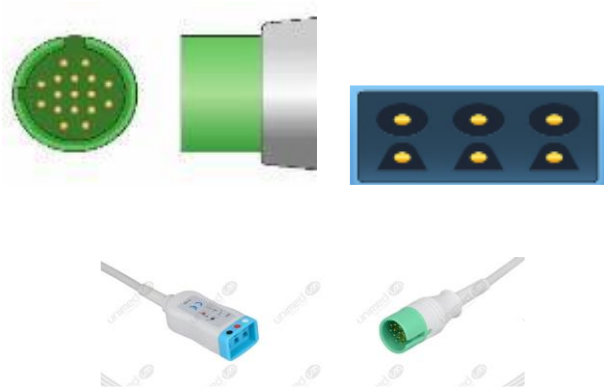
Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**CABLE ECG PARA 3 DERIVADAS**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	SL-2396
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Conector	Redondo 17 pin/ 3 pin, Spacelabs
Compatible con:	Spacelabs Ultraview 90492; Ultraview 91220; Ultraview 90496; Ultraview 91496; 90309; 90367; 90367 Ultraview; 90369; 90369 Ultraview; 90492; 90496; 90496 Ultraview; 91220 mCare 300; 91369; 91496; 93300; Elance Series; Qube; Ultraview; Ultraview SL
Longitud del cable:	2.5M
Diámetro del cable	5.0mm
Peso:	159g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente.

	- Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.