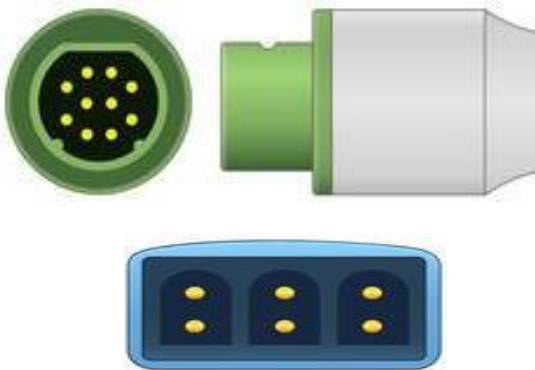


IMAGEN: 		PRODUCTO		CABLE ECG DRAGUER / SIEMENS PARA 3 DERIVADAS			
		MARCA		UNIMED			
		REFERENCIA		SM-2376			
		REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1			
		RIESGO		IIA			
USO - DESCRIPCIÓN		Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.					
CARACTERÍSTICAS		Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Conector		Redondo 10 pin/ 3 pin, Tipo “LL”			
		Compatible con:		Monitores Siemens 400 Series, 500 Series, 700 Series, 900 Series, 1200,			
		Longitud del cable:		2.5M			
		Diámetro del cable		5.0mm			
		Peso:		159g			
		Autoclavable:		No			
		Temp. Operación:		5°C a 45°C			
		Humedad operación:		0 a 80% No condensada			
MATERIAL / COMPOSICIÓN		Filamentos de metal, TPU					
ALMACENAMIENTO		Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada					
PRESENTACIÓN		Unidad.					
RECOMENDACIONES		Mantenimiento: - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución.					

Precauciones:

- Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración.
- No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente.
- Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura.
- Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal.
- Siempre refiérase al manual de operador del módulo para instrucciones completas o información adicional.
- Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.