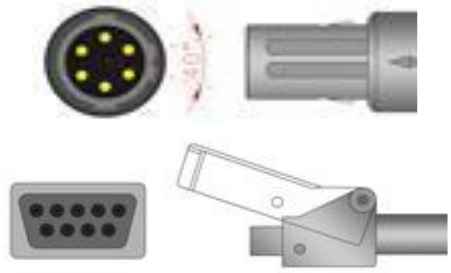
Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**EXTENSIÓN PARA SENSOR DE SPO2**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	U708-30M
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004317-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico indicado para hacer la interconexión eléctrica entre el equipo biomédico y el sensor de saturación de oxígeno arterial durante el monitoreo
CARACTERÍSTICAS	Indicado para el uso en monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno arterial y pulso cardiaco. Son compatibles con sensores de la mayoría de marcas de monitores de paciente y pulsoxímetros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

Conector	Redell 6 pines / DB9
Compatible con:	Mindray Tecnología Masimo 0010-30-42625
Longitud del cable:	2.2M
Diámetro del cable	4.0mm
Peso:	0.54kg
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningùn tipo de solución.

	Precauciones: - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo de oximetría podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Siempre refiérase al manual de operador del módulo de oximetría para instrucciones completas o información adicional. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.